



Istruzioni per installare la stazione DEM'O



1. Messa in funzione

La stazione può essere montato a parete (viti e tasselli sono forniti) o su un carrello, utilizzato in orizzontale o appoggiato su un piano.





- Collegare il tubo di alimentazione al rubinetto utilizzando l'adattatore in dotazione.
- Rimuovere il tappo chiudendo il tubo di uscita. Impostare la portata su un massimo di 60 litri all'ora.

2. Cambio di colonna (KC+)

Il livello di saturazione della stazione è visibile nella colonna BLU con l'etichetta (la resina satura diventa color OCRA).

- Quando la colonna BLU con l'etichetta ha cambiato colore completamente, rimuovere tutte le colonne dal supporto utilizzando il set di chiavi fornito.
- Sostituirle con colonne nuove; la colonna blu con l'etichetta sarà sempre la penultima.
- Sostituire i collegamenti di ingresso/uscita e quelli di interconnessione tra le colonne.

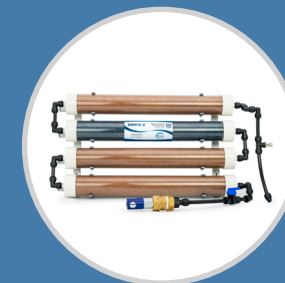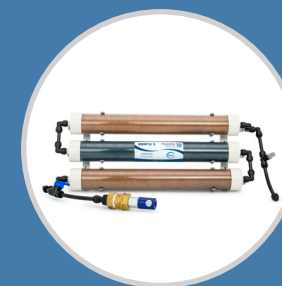

3. Pezzi di ricambio

Punte di ricambio:

- punta di raccordo a gomito RC.DEMO

Tubo di ricambio:

- tubo in polietilene: TP.DEMO

Per evitare che si crei un eccesso di pressione, chiudere la valvola di alimentazione dell'acqua in cima all'apparecchio quando questo non viene utilizzato.